

Male Edge tuotteidet käyttöohjeet

Male Edge Basic, Male Edge Extra and Male Edge Pro

1



ALOITTAMINEN

Male edge toimitetaan valmiiksi koottuna

2



KAKSITOIMINEN ETUOSA

Mikäli peniksesi on lepotilassa yli 12cm, käännä etuosa/ kumipanta ympäri. Jos taas peniksesi on alle 12cm, jätä osa alkuperäiseen asentoonsa

3



TUKIRENGAS

Irroita etuosa vetosauvoista. Asenna tukirengas peniksesi juureen ja jätä se siihen.


4



SOVITTAMINEN

Aseta panta paikoilleen ja kiristä. Voit asentaa pannan joko esinahan päälle tai vetää sen taakse. Kumpi vain on mukavampi.

5

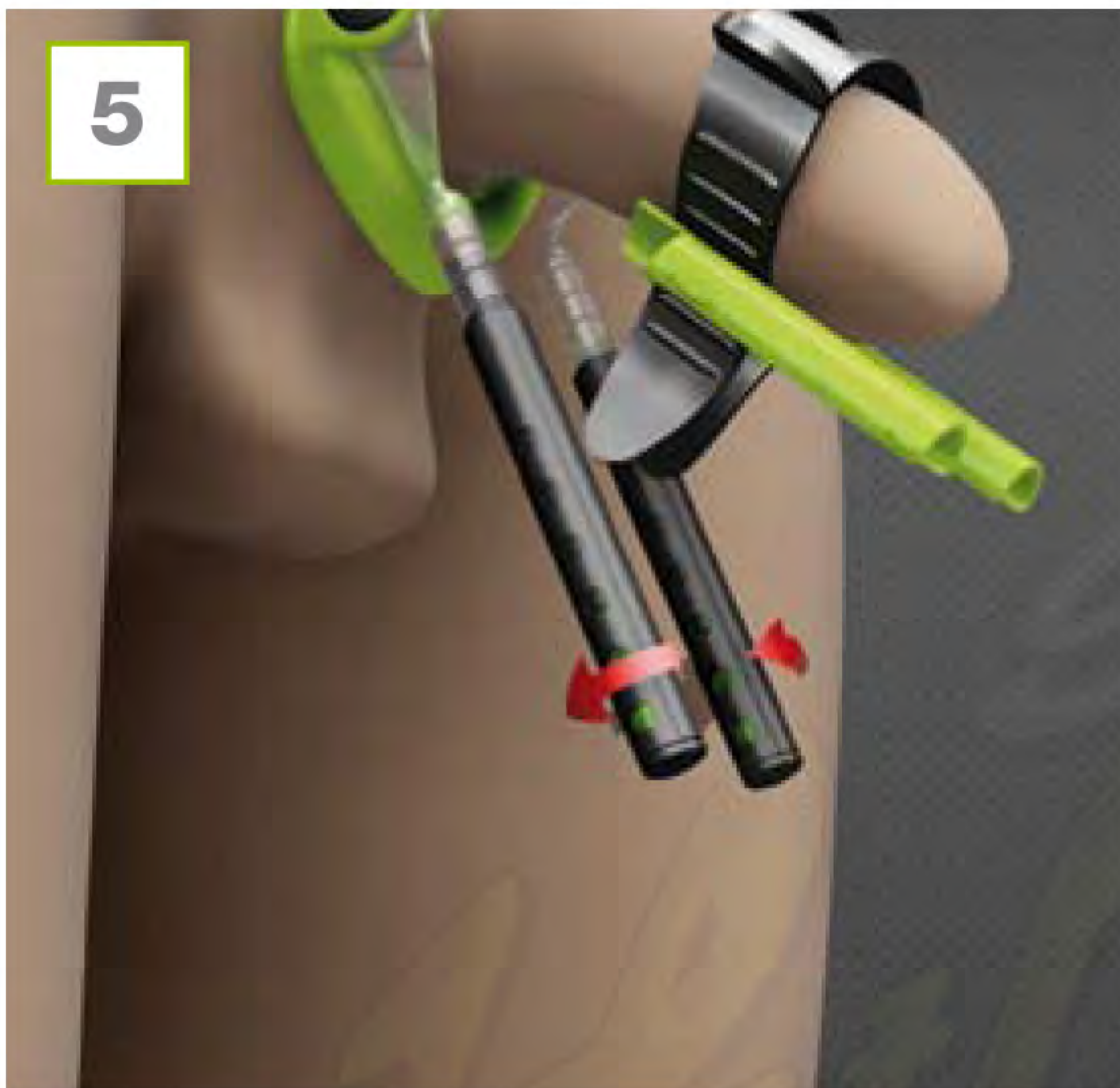

SÄÄTÖSAUVOJEN SÄÄTÖ

Käännä sauvoja myötäpäivään neljänneksen ja vedä sauvat sopivalle pituudelle.


6



SÄÄTÖSAUVOJEN PITUUDEN SÄÄTÖ

Kun olet saanut pituuden sopivaksi, käännä sauvoja neljännes takaisin ja kuulet kaksi klikkausta.

7

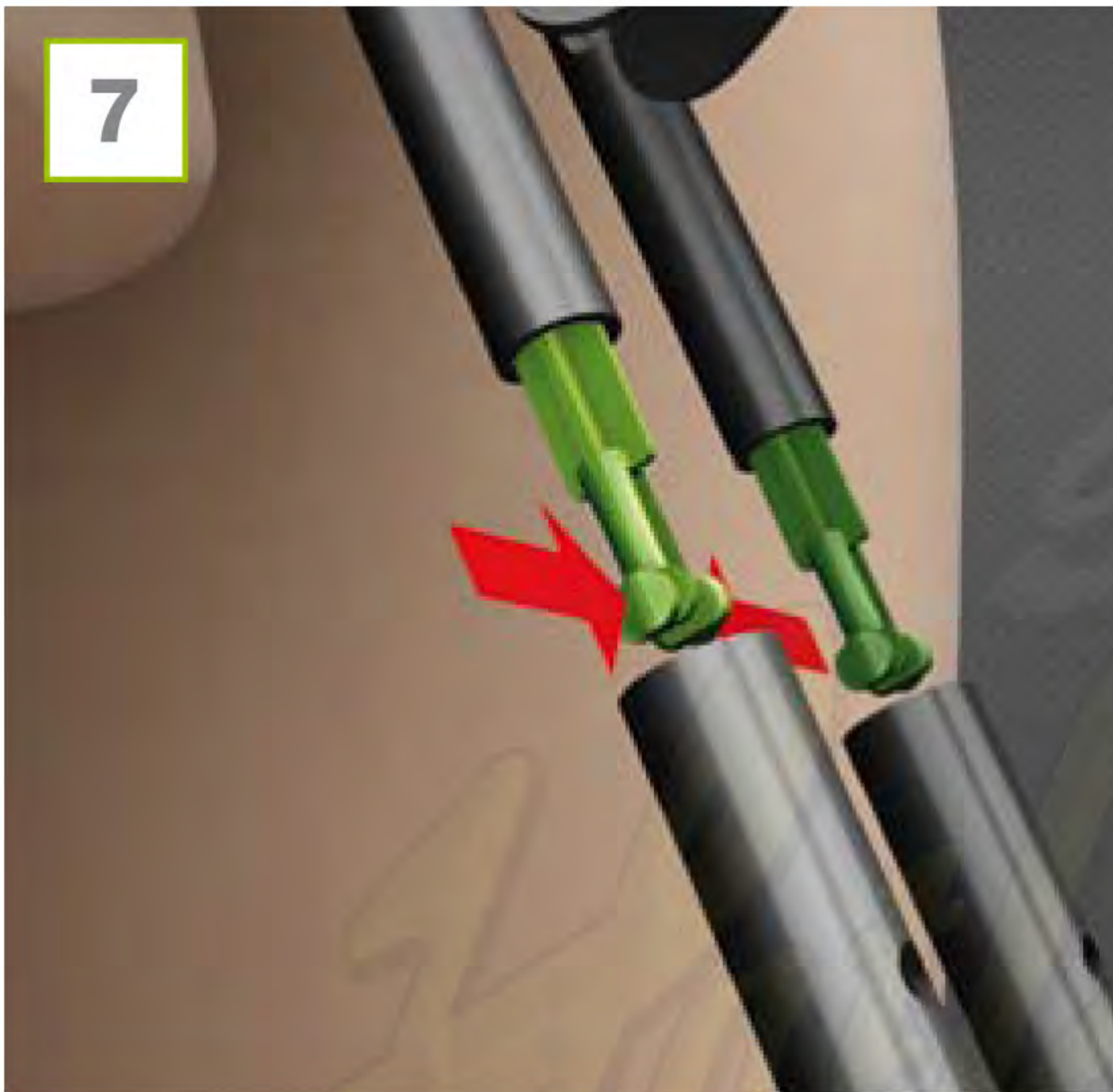

ÄLÄ YLIVIRITÄ SÄÄTÖSAUVOJA


Varmista, että sauvat eivät tule viimeisen reijän yli. Jos ne lipsahtavat ulos, paina ne takaisin kuvan esittämällä tavalla

8




KIINNITTÄMINEN

Kun olet säätänyt sauvat sopivan mittaisiksi, työnnä ne varovasti itseesi päin. Nyt kiinnitä ne etuosaan. Kuulet naksahduksen kun laite on paikallaan. Laite on nyt käyttökunnossa.

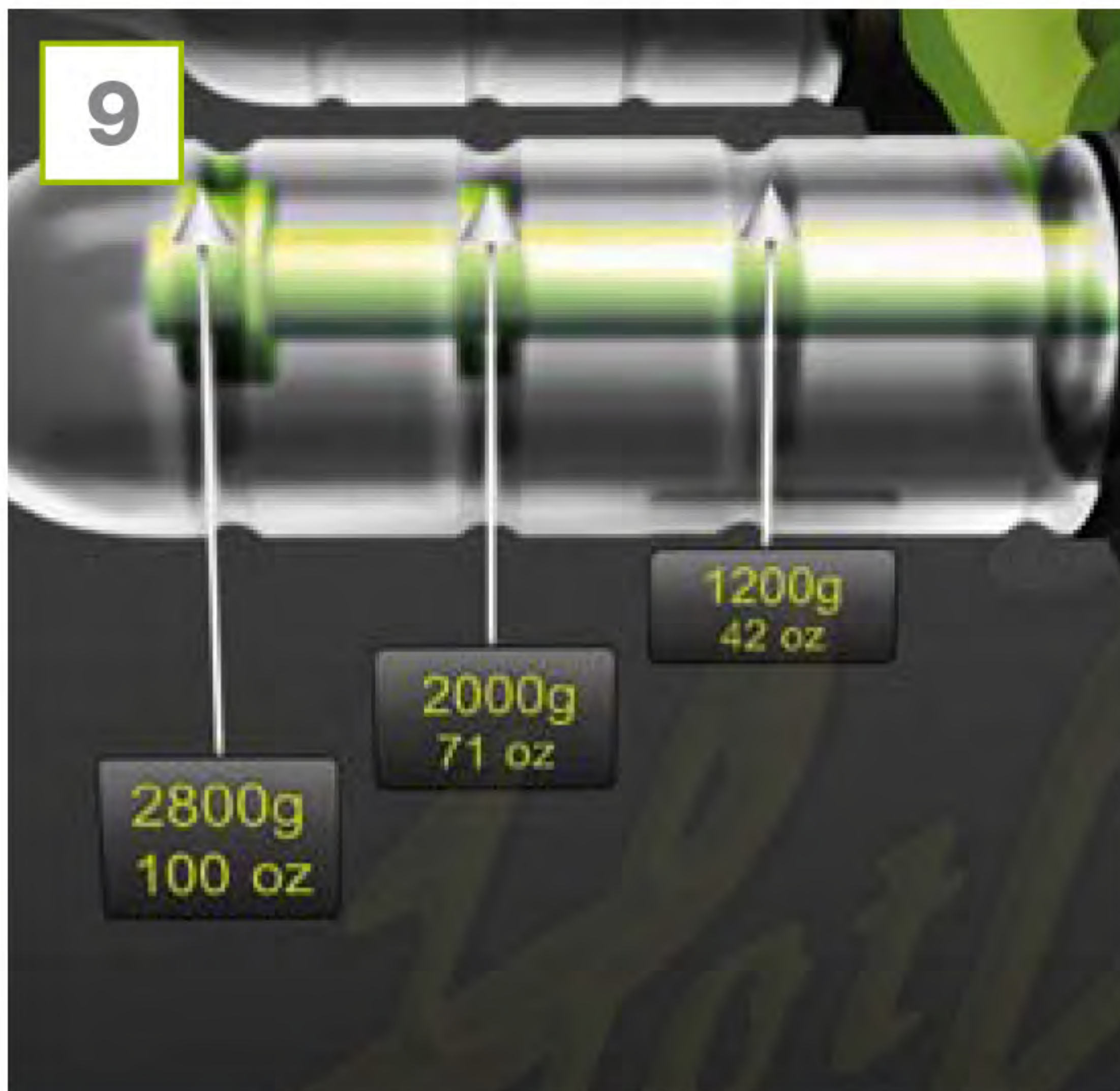

VEDON LUKEMINEN

Lue asteikosta vedon määrä. Vedon määrä näkyy läpinäkyvästä sylinteristä.

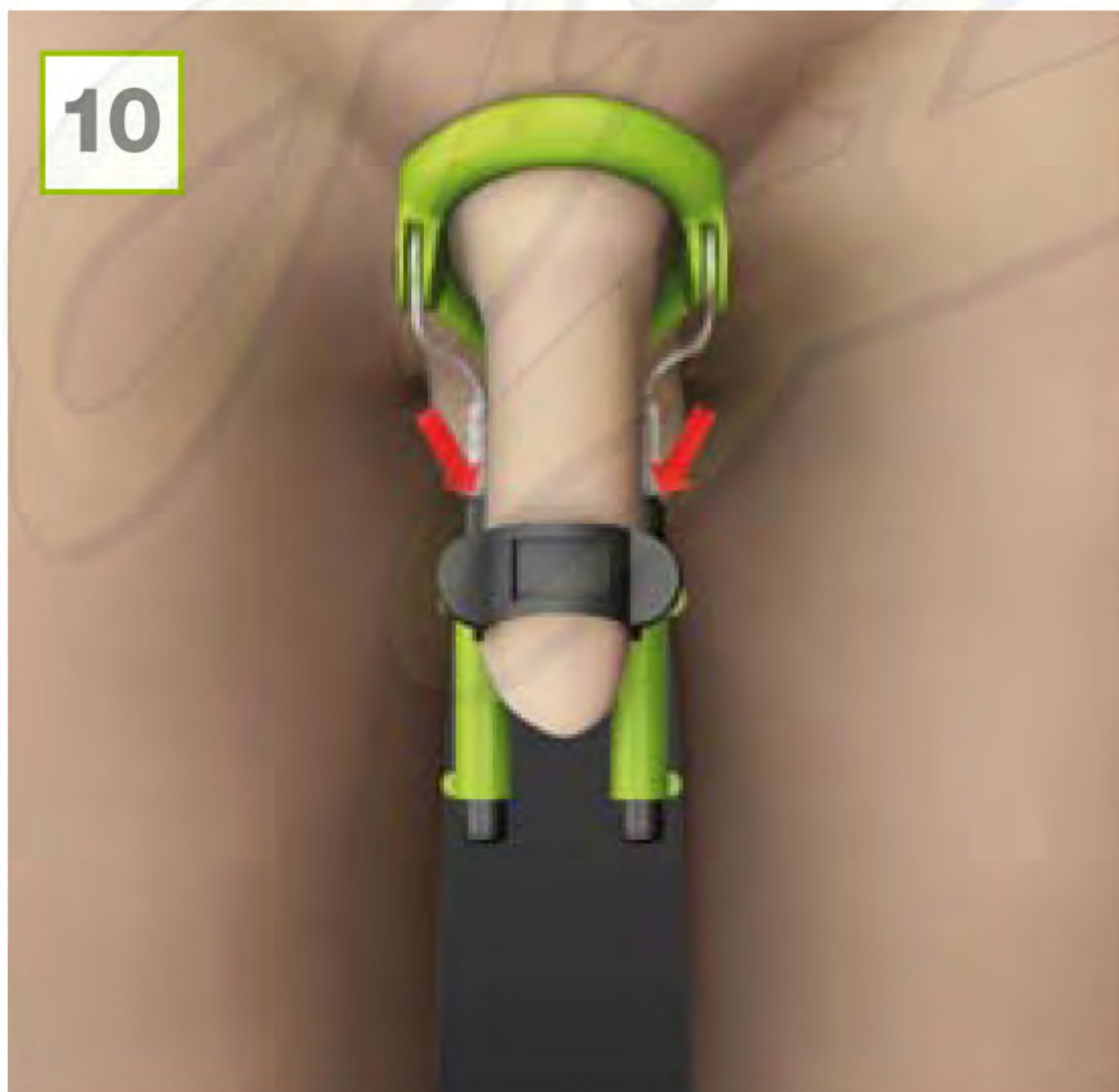

VEDON LISÄÄMINEN

Siirrä säätösauvoja eteenpäin. Siirrä sauvoja aina yksi naksaus kerrallan.

11 HITAAN ALOITTAMISEN AIKATAULU

VIIKKO	VEDON MÄÄRÄ	TUNTIA/PÄIVÄ
1	8-1200g / 28-42oz	1
2	8-1200g / 28-42oz	2
3	1200g / 42oz	3
4	1200g / 42oz	4
5	1200-2000g / 42-71oz	5
6	1200-2000g / 42-71oz	6

12 KÄYTTÖ JA HUOLTO

Male edge laitteen käyttö on erittäin huoletonta. Laite kääntyy ylös ja alas, jotta saat sen mahdollisimman mukavaan asentoon. Voit käyttää sitä myös löysien housujen alla vaikka päivisin. Voit käyttää sitä myös öisin, mutta otathan huomioon yöllisen liikkumisesi.

Male Edge on korkealaatuinen ja todella helppo huoltaa. Voit pestä kaikki osat vaikka asitanpesukoneessa, pois lukien säätöruuvit ja etuosa.

Tilaukset: www.hotlips.fi Tai soita: 09-7732292 Ma-Pe 9-16